



UDI: 576037912401EY

Genel Tanım: Konsantre Hemodiyaliz solüsyonları, diyaliz makinelerinde belirli oranlarda, reverse osmos su ile dilüe edilerek, extracorporeal dolaşımın kanın purifiye edilmesinde endikedirler.

Kullanım Amacı: Cihazın, tüm yaş aralıklarında akut kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 24 saatten az sürecek şekilde beden dışı bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisinde kullanılması amaçlanır. Kullanım amacı için ilgili kritik performans gereklilikleri ve beklenen klinik faydalar şunlardır:

- Akut - Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların kan değerlerinde hali hazırda yüksek olan Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Glikoz ve ürenin uzaklaştırılması ve kandaki bu değerlerin dengelenmesi işlemi.
- Akut Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların kan değerlerinde hali hazırda düşük olan Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Glikozun dengelenmesi işlemi.

İşleyiş: Tedavi esnasında hasta kanı, arter kan hattı ile diyaliz makinesine, diyalizere ve ven hattı vasıtası ile tekrar hastaya verilir. Hemodiyaliz cihazları hasta kanının belirli bir hızla ve basınçla extracorporeal devrede dolaşmasını sağlarken, ısı, arteriel basınç, venöz basınç, TMP, solüsyonun dilüe edilmesi, dilüe edilmiş solüsyonun kondaktivitesi gibi birçok parametreyi düzenler ve kontrol eder.

Farmakolojik Özellikleri: Asidik konsantre solüsyonu ile bazik konsantre solüsyonu birlikte ve uygun şekilde hemodiyaliz cihazlarında dilüe edilerek kullanılır. Uygun şekilde dilüe edilmiş solüsyonlar hemodiyaliz cihazlarında extracorporeal sirkülasyonla, kanla temas etmeden kanın selektif olarak toksik maddelerden ve aşırı vücut sıvılarından arındırılmasını sağlar.

Hasta kanının purifiye edilmesi osmotik basınç prensibinden hareketle diffüzyon ve konvektif olarak iki olayla diyalizörde gerçekleşir. Konsantre hemodiyaliz solüsyonları uygun şekilde dilüe edildiği zaman normal insan kanı ile yaklaşık aynı düzeyde elektrolit ihtiva eder ve dolayısıyla aynı osmotik basınca sahiptirler.


Böbrek fonksiyonlarının kısmen azalması veya yok olması, kanda üremik toksinlerin birikimi ile sonuçlanırken, kanın osmotik basıncında yükselir. Tedavi esnasında kanda birikmiş olan üremik toksinler difüzyon ve konveksiyon ile solüsyona geçerken elektrolit seviyesi de dengelenir. Tedavi süresi ve uygun solüsyon seçimi hekim tarafından belirlenir.

Güvenlik ve Performans Bilgileri:

- Cihaz kanla diyalizör içerisinde direkt-olmayan temas halindedir. Bu direkt-olmayan temas difüzyon yoluyla olmaktadır.
- Cihaz, meslekten olmayan kişilerce kullanılamaz. Cihaz kullanıcısı, gerekli eğitimleri almış en az ön lisans mezunu sağlık personeli olmak zorundadır. (teknisyen, hemşire, doktor)
- Ürün, ağız yoluyla içerek kullanılmalıdır. Yanlışlıkla içilmesini önlemek amacıyla ürün mavi ve kırmızı renkte kapaklara sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. İçildiği takdirde Gastrointestinal sistemde ciddi tahribata neden olabilir.
- Ürünün, kullanımı esnasında seyreltme oranına dikkat edilmelidir.
- Kullanım esnasında hastanın kan değerleri göz önünde bulundurularak doğru kimyasal formülasyon seçimi yapılması önemlidir. Ürünümüzün, birçok kimyasal formülasyona sahip olması nedeniyle müşteri lokasyonunda kullanılacak ürünün seçimini gerekli eğitimleri almış en az ön lisans mezunu sağlık personeli (teknisyen, hemşire, doktor) olmak zorundadır.
- Birlikte kullanıldığı diğer cihazların kalibrasyonunu, bakımına ve periyodik kontrollerine dikkat edilmelidir. Müşteri lokasyonunda kullanılan esnasında diyaliz makinesinin uygun olmayan kalibrasyonu sonucu veya periyodik kontrollerine uymamanın sonucunda ürün kimyasal formülasyonunda hataya sebep olabilir.
- Etiket üzerinde belirtilen ürün raf ömrü dikkate alınmalıdır. Raf ömrü geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.
- Ürün, tek kullanımlıktır, tekrar kullanmayınız. Ürünün tekrar kullanılması veya artık solüsyon kullanımı sonucunda üründe endotoksin üretmesi ve mikrobiyal kontaminasyon oluşumu gözlenebilir.
- Ürün kimyasal formülasyonunun bilinmemesi, etiketsiz ürün kullanılması veya kullanma kılavuzu olmaması, kullanımda ürün kimyasal formülasyonunda farklılıklara sebep olabilir.

Yan Etkiler: Hipotansiyon, Kas Krampları, Bulantı, Kusma, Baş Ağrısı, Baş Dönmesi, Bilinç Kaybı, Sırt Ağrısı, Kaşıntı, Yorgunluk
Kontrendikasyon: Yüksek oranda potasyum içeren asit konsantresi kullanımında HİPERKALEMİ, düşük oranda potasyum içeren asit konsantresi kullanımında HİPOKALEMİ.

Saklama Koşulları: İy kapatılmış kaplarda, 5-25° C arasında, doğrudan güneş ışığından koruyarak kuru yerlerde ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. En yüksek üst üste istifleme sayısı 5'dir.

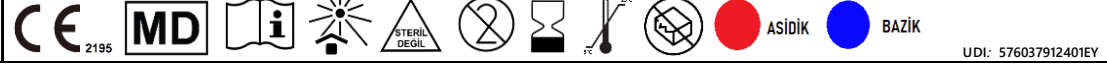

UDI: 576037912401EY

General Description: Concentrated haemodialysis solutions are indicated for the purification of blood by extracorporeal circulation by diluting with reverse osmosis water in certain ratios in dialysis machines.

Intended Use: The device is intended to be used in the treatment of patients with acute chronic renal failure in all age ranges for less than 24 hours of extracorporeal bicarbonate haemodialysis. The relevant critical performance requirements and expected clinical benefits for the intended use are as follows:

- Removal of sodium, potassium, calcium, magnesium, glucose and urea, which are already high in the blood values of patients with acute - chronic renal failure, and the process of balancing these values in the blood.
- The process of balancing the already low sodium, potassium, calcium, magnesium, magnesium and glucose in the blood of patients with acute chronic renal failure.

How it works: During the treatment, the patient's blood is given to the dialysis machine via the arterial blood line, to the dialyser and back to the patient via the vein line.

Haemodialysis devices regulate and control many parameters such as temperature, arterial pressure, venous pressure, TMP, dilution of the solution, concentration of the diluted solution while ensuring that the patient's blood circulates in the extracorporeal circuit at a certain speed and pressure.

Pharmacological Properties: Acidic concentrated solution and basic concentrated solution are used together and properly diluted in haemodialysis devices. Appropriately diluted solutions provide selective purification of blood from toxic substances and excess body fluids without contact with blood by extracorporeal circulation in haemodialysis devices.

Purification of the patient's blood takes place in the dialyser in two events, diffusive and convective, based on the principle of osmotic pressure.

Concentrated haemodialysis solutions, when properly diluted, contain approximately the same level of electrolytes as normal human blood and therefore have the same osmotic pressure.

A partial reduction or disappearance of renal function results in the accumulation of uremic toxins in the blood, which increases the osmotic pressure of the blood. During treatment, the uremic toxins accumulated in the blood are transferred to the solution by diffusion and convection and the electrolyte level is stabilised. Duration of treatment and appropriate solution selection is determined by the physician.

Safety and Performance Information:

- The device is in-direct contact with the blood in the dialyser. This in-direct contact is by diffusion.
- The device cannot be used by laymen. The device user must be at least an associate degree graduate health personnel who have received the necessary training (technician, nurse, doctor).
- The product should be used by drinking orally. The product is designed with blue and red coloured caps to prevent accidental drinking. If drunk, it may cause serious damage to the gastrointestinal system.
- The dilution ratio of the product should be observed during use.
- It is important to choose the right chemical formulation by considering the patient's blood values during use. Since our product has many chemical formulations, the selection of the product to be used at the customer location must be made by health personnel (technician, nurse, doctor) with at least associate degree who have received the necessary training.
- Attention should be paid to the calibration, maintenance and periodic controls of other devices used together. Inappropriate calibration of the dialysis machine during use at the customer location or failure to comply with periodic controls may cause errors in the chemical formulation of the product.
- The product shelf life indicated on the label must be taken into consideration. Products with expired shelf life should not be used.
- The product is for single use only, do not reuse. Endotoxin growth and microbial contamination may occur in the product as a result of reuse of the product or use of residual solution.
- Failure to know the chemical formulation of the product, use of unlabelled product or lack of instructions for use may cause differences in the chemical formulation of the product during use.

Side Effects: Hypotension, Cramps, Nausea, Vomiting, Headache, Dizziness, Loss of Consciousness, Back Pain, Itching, Fatigue
Contraindication: HİPERKALEMİA in the use of acid concentrate with high potassium content, HİPOKALEMİA in the use of acid concentrate with low potassium content.

Storage Conditions: It should be stored in well-closed containers, between 5-25° C, protected from direct sunlight, in dry places and out of the reach of children. The maximum number of stacking is 5.

**Solüsyonların Dilüe Oranları:**

KON-B ve KON-A kodlu ürünlerimizin dilüe oranları şu şekildedir; (Universal Formülasyonlar için)

- 1,000 L Farmakon KON-A kodlu Asit Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu
- 1,225 L Farmakon KON-B kodlu Bazik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu
- 32,775 L Reverse Osmos Su

KON-B ve KON-A-Y kodlu ürünlerimizin dilüe oranları şu şekildedir; (Universal Formülasyonlar için)

- 1,000 L Farmakon KON-A-Y kodlu Asit Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu
- 1,775 L Farmakon KON-B kodlu Bazik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu
- 42,225 L Reverse Osmos Su

KON-B GR ve KON-A GR kodlu ürünlerimizin dilüe oranları şu şekildedir; (Gambro Formülasyonlar için)

- 1,000 L Farmakon KON-A GR kodlu Asit Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu
- 1,830 L Farmakon KON-B GR kodlu Bazik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu
- 34,000 L Reverse Osmos Su

Uyarılar:

- Kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Güneş ışığından koruyarak muhafaza ediniz.
- Tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayınız. (5L ve 6L ambalajlı ürünler için)
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.
- 5°C - 25°C arasındaki sıcaklıkta depolanmalıdır.
- Etiketsiz ürünleri kullanmayınız.
- Artan solüsyonları kullanmayınız, yasalara uygun olarak imha ediniz. Artıklar ürün formülasyonun değişmesine, komplikasyonlara ve hemodiyaliz cihazlarında arızalara neden olabilir.
- Uygunsuz kombinasyonlar veya farklı oranlarda dilüe edilmesi tortu oluşumuna, komplikasyonlara ve hemodiyaliz cihazında arızalara neden olabilir.
- Yetkili kişilerin sorumluluğu altında kullanılmalıdır.
- Kapak ve/veya bidon hasar görmüş ise kullanmayınız.
- Tedaviden önce diyaliz makinesinin bağlantılarını kontrol ediniz.
- Diyaliz makinesinin bakım ve kalibrasyonları için üretici firmanın talimatlarına uyunuz.
- Dilüe edilmiş solüsyon karışımının pH ı 6.0-8.0 arasında olmalıdır.
- Hemodiyaliz cihazlarınızın periyodik kontrollerini zamanında yaptırınız.
- Hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon ve dekalifikasyon işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapınız.

**Dilution Ratios of Solutions:**

The dilution rates of our KON-B and KON-A coded products are as follows; (for Universal Formulations)

- 1,000 L Farmakon KON-A coded Acid Concentrated Hemodialysis Solution
- 1,225 L Farmakon KON-B coded Basic Concentrated Haemodialysis Solution
- 32,775 L Reverse Osmosis Water

The dilution rates of our KON-B and KON-A-Y coded products are as follows; (for Universal Formulations)

- 1,000 L Farmakon KON-A-Y coded Acid Concentrated Haemodialysis Solution
- 1,775 L Farmakon KON-B coded Basic Concentrated Haemodialysis Solution
- 42,225 L Reverse Osmosis Water

The dilution rates of our KON-B GR and KON-A GR coded products are as follows; (for Gambro Formulations)

- 1,000 L Farmakon KON-A GR coded Acid Concentrated Hemodialysis Solution
- 1,830 L Farmakon KON-B GR coded Basic Concentrated Haemodialysis Solution
- 34,000 L Reverse Osmosis Water

Warnings:

- Read the instructions before use.
- Keep away from sunlight.
- For single use only. Do not reuse (for 5L and 6L packaged products)
- Do not use expired products.
- Store at temperature between 5°C - 25°C.
- Do not use unlabelled products.
- Do not use leftover solutions, dispose of them in accordance with the law. Residues may cause changes in product formulation, complications and malfunctions in haemodialysis devices.
- Inappropriate combinations or dilution at different ratios may cause sediment formation, complications and malfunction of the hemodialysis device.
- It must be used under the responsibility of authorised persons.
- Do not use if the lid and/or canister is damaged.
- Check the connections of the dialysis machine before treatment.
- Follow the manufacturer's instructions for maintenance and calibration of the dialysis machine.
- The pH of the diluted solution mixture must be between 6.0-8.0.
- Have your haemodialysis devices periodically checked on time.
- Perform disinfection and decalcification of haemodialysis devices in a timely and complete manne



UDI: 576037912401EY



UDI: 576037912401EY

KONSANTRE HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI Ürün Listesi / Concentrate Hemodialysis Solution Product List

Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı
999	8699459939997	FARMAKON B35 5LT	957	8699459939577	FARMAKON A 1K 1,25Ca 1,0Mg G 5LT	915	8699459939157	FARMAKON-A 2K 1,75CA G 5LT
998	8699459939980	FARMAKON B35 6LT	956	8699459939560	FARMAKON-A 1K 1.25CA 1.0MG G 8LT	914	8699459939140	FARMAKON-A 2K 1,75CA G 8LT
997	8699459939973	FARMAKON B35 10LT	955	8699459939553	FARMAKON-A 1K 1.25CA 1.0 MG G 10LT	913	8699459939133	FARMAKON-A 2K 1,75CA G 10LT
996	8699459939966	FARMAKON B36 5LT	954	8699459939546	FARMAKON-A 1K 5LT	912	8699459939126	FARMAKON-A 2K 1,75CA 2G 5LT
995	8699459939959	FARMAKON B36 6LT	953	8699459939539	FARMAKON-A 1K 8LT	911	8699459939119	FARMAKON-A 2K 1,75CA 2G 8LT
994	8699459939942	FARMAKON B36 10LT	952	8699459939522	FARMAKON A 1K 10LT	910	8699459939102	FARMAKON-A 2K 1,75CA 2G 10LT
993	8699459939935	FARMAKON-A 1K 5LT	951	8699459939515	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 5LT	909	8699459939096	FARMAKON-A 2K 142NA 1,0MG 3AS 5LT
992	8699459939928	FARMAKON A 1K 8LT	950	8699459939508	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 8LT	908	8699459939089	FARMAKON A 2K 142Na 1,0Mg 3AS 8LT
991	8699459939911	FARMAKON-A 1K 10LT	949	8699459939492	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 10LT	907	8699459939072	FARMAKON-A 2K 142NA 1,0MG 3AS 10LT
990	8699459939904	FARMAKON A 1K G 5LT	948	8699459939485	FARMAKON-A 1K 1.0CA G 5LT	905	8699459939058	FARMAKON-A 2K 142NA 1,0MG 3AS G 8LT
989	8699459939898	FARMAKON A 1K G 8LT	947	8699459939478	FARMAKON-A 1K 1.0CA G 8LT	904	8699459939041	FARMAKON A 2K 142Na 1,0Mg 3AS G 10LT
988	8699459939881	FARMAKON-A 1K G 10 LT	946	8699459939461	FARMAKON-A 1K 1.0CA G 10LT	903	8699459939034	FARMAKON-A 2K 138NA 1,25CA 5LT
987	8699459939874	FARMAKON A 1K 1,25Ca 5LT	945	8699459939454	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 1.0MG 3AS 5LT	902	8699459939027	FARMAKON-A 2K 138NA 1,25CA 8LT
986	8699459939867	FARMAKON-A 1K 1.25CA 8LT	944	8699459939447	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 1.0MG 3AS 8LT	901	8699459939010	FARMAKON A 2K 138Na 1,25Ca 10LT
985	8699459939850	FARMAKON-A 1K 1.25 CA 10LT	943	8699459939430	FARMAKON-A 1K138NA 1.25CA 1.0MG 3AS 10LT	900	8699459939003	FARMAKON A 2K 138Na 1,25Ca G 5LT
984	8699459939843	FARMAKON A 1K 1,25Ca G 5LT	942	8699459939423	FARMAKON A 1K 0.5G 5LT	899	8699459938990	FARMAKON A 2K 138NA 1,25CA G 8LT
983	8699459939836	FARMAKON A 1K 1,25Ca G 8LT	941	8699459939416	FARMAKON-A 1K 0.5G 8LT	898	8699459938983	FARMAKON A 2K 138Na 1,25Ca G 10LT
982	8699459939829	FARMAKON A 1K 1,25Ca G 10LT	940	8699459939409	FARMAKON-A 1K 0.5G 10LT	897	8699459938976	FARMAKON A 2K 1,0Mg G 5LT
981	8699459939812	FARMAKON A 1K 1,75Ca 5LT	939	8699459939393	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 1.0MG 3AS G 5LT	896	8699459938969	FARMAKON A 2K 1,0MG G 8LT
980	8699459939805	FARMAKON A 1K 1,75Ca 8LT	938	8699459939386	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA 1.0MG 3AS G 8LT	895	8699459938952	FARMAKON A 2K 1,0Mg G 10LT
979	8699459939799	FARMAKON A 1K 1.75 CA 10LT	937	8699459939379	FARMAKON A 1K 138Na 1,25Ca 1,0Mg 3AS G 10LT	894	8699459938945	FARMAKON-A 2K 138NA G 5LT
978	8699459939782	FARMAKON-A 1K 1.75CA 5LT	936	8699459939362	FARMAKON-A 1K 1.25CA 3AS G 5LT	893	8699459938938	FARMAKON A 2K 138Na G 8LT
977	8699459939775	FARMAKON-A 1K 1.75CA G 8LT	935	8699459939355	FARMAKON-A 1K 1.25CA 3AS G 8LT	892	8699459938921	FARMAKON-A 2K 138NA G 10LT
976	8699459939768	FARMAKON-A 1K 1.75CA G 10LT	934	8699459939348	FARMAKON A 1K 1.25CA 3AS G 10LT	891	8699459938914	FARMAKON-A 2K 138NA G 5LT
975	8699459939751	FARMAKON A 1K 2G 5LT	933	8699459939331	FARMAKON A 1K 1,0Mg 3AS G 5LT	890	8699459938907	FARMAKON A 2K 138NA G 8LT
974	8699459939744	FARMAKON A 1K 2G 8LT	932	8699459939324	FARMAKON-A 1K 1MG 3AS G 8LT	889	8699459938891	FARMAKON A 2K 138NA G 10LT
973	8699459939737	FARMAKON-A 1K 2G 10LT	931	8699459939317	FARMAKON A 1K 1,0Mg 3AS G 10LT	888	8699459938884	FARMAKON A 2K 1,75CA 3AS G 5LT
972	8699459939720	FARMAKON-A 1K 1.25CA 2G 5LT	930	8699459939300	FARMAKON A 2K 5LT	887	8699459938877	FARMAKON A 2K 1,75Ca 3AS G 8LT
971	8699459939713	FARMAKON A 1K 1,25Ca 2G 8LT	929	8699459939294	FARMAKON A 2K 8LT	886	8699459938860	FARMAKON-A 2K 1,75CA 3AS G 10LT
970	8699459939706	FARMAKON-A 1K 1.25 CA 2G 10LT	928	8699459939287	FARMAKON-A 2K 10LT	885	8699459938853	FARMAKON A 2K 1,25Ca 3AS G 5LT
969	8699459939690	FARMAKON-A 1K 1.75CA 2G 5LT	927	8699459939270	FARMAKON-A 2K G 5LT	884	8699459938846	FARMAKON-A 2K 1,25CA 3AS G 8LT
968	8699459939683	FARMAKON-A 1K 1.75CA 2G 8LT	926	8699459939263	FARMAKON-A 2K G 8LT	883	8699459938839	FARMAKON-A 2K 1,25CA 3AS G 10LT
967	8699459939676	FARMAKON A 1K 1,75Ca 2G 10LT	925	8699459939256	FARMAKON A 2K G 10LT	882	8699459938822	FARMAKON-A 2K 3AS 2G 5LT
966	8699459939669	FARMAKON A 1K 138Na 1,25Ca G 5LT	924	8699459939249	FARMAKON A 2K 1,25Ca G 5LT	881	8699459938815	FARMAKON-A 2K 3AS 2G 8LT
965	8699459939652	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA G 8LT	923	8699459939232	FARMAKON-A 2K 1.25CA G 8LT	880	8699459938808	FARMAKON-A 2K 3AS 2G 10LT
964	8699459939645	FARMAKON-A 1K 138NA 1.25CA G 10 LT	922	8699459939225	FARMAKON A 2K 1.25CA G 10LT	879	8699459938792	FARMAKON A 2K 3AS 5LT
963	8699459939638	FARMAKON A 1K 138Na 5LT	921	8699459939218	FARMAKON-A 2K 1.25CA 2G 5LT	878	8699459938785	FARMAKON A 2K 3AS 8LT
962	8699459939621	FARMAKON-A 1K 138NA 8LT	920	8699459939201	FARMAKON A 2K 1.25CA 2G 8LT	877	8699459938778	FARMAKON A 2K 3AS 10LT
961	8699459939614	FARMAKON-A 1K 138NA 10LT	919	8699459939195	FARMAKON-A 2K 1,25CA 2G 10LT	876	8699459938761	FARMAKON-A 2K 3AS G 5LT
960	8699459939607	FARMAKON A 1K 1,0Ca 5LT	918	8699459939188	FARMAKON-A 2K 1,75CA 5LT	875	8699459938754	FARMAKON A 2K 3AS G 8LT
959	8699459939591	FARMAKON A 1K 1,0Ca 8LT	917	8699459939171	FARMAKON A 2K 1,75CA 8LT	874	8699459938747	FARMAKON A 2K 3AS G 10LT
958	8699459939584	FARMAKON-A 1K 1.0CA 10LT	916	8699459939164	FARMAKON A 2K 1,75CA 10LT	873	8699459938730	FARMAKON A 2K 1,75Ca 1,0Mg G 5LT



UDI: 576037912401EY



UDI: 576037912401EY

KONSANTRE HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI Ürün Listesi / Concentrate Hemodialysis Solution Product List

Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı
872	8699459938723	FARMAKON A 2K 1,75Ca 1,0Mg G 8LT	826	8699459938266	FARMAKON-A 2K1,25CA 3AS 10LT	784	8699459937849	FARMAKON A 3K 142Na 1,0Mg 3AS 10LT
871	8699459938716	FARMAKON A 2K 1,75Ca 1,0Mg G 10LT	825	8699459938259	FARMAKON A 2K 1,25Ca 0,25Mg 5LT	783	8699459937832	FARMAKON-A 3K 142NA 1,0MG 3AS G 5LT
866	8699459938662	FARMAKON-A 2K 1,75CA 1,0MG G 8LT	824	8699459938242	FARMAKON A 2K 1,25CA 0,25MG 8LT	782	8699459937825	FARMAKON-A 3K 142NA 1,0MG 3AS G 8LT
865	8699459938655	FARMAKON A 2K 1,75Ca 1,0Mg G 10LT	823	8699459938235	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG 10LT	781	8699459937818	FARMAKON-A 3K 142NA 1,0MG 3AS G 10LT
864	8699459938648	FARMAKON A 2K 1,0MG 5LT	822	8699459938228	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG G 5LT	780	8699459937801	FARMAKON A 3K 138NA 1,25CA 5LT
863	8699459938631	FARMAKON A 2K 1,0Mg 8LT	821	8699459938211	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG G 8LT	779	8699459937795	FARMAKON A 3K 138NA 1,25CA 8LT
862	8699459938624	FARMAKON A 2K 1,0Mg 10LT	820	8699459938204	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG G 10LT	778	8699459937788	FARMAKON A 3K 138NA 1,25CA 10LT
861	8699459938617	FARMAKON-A 2K 1,0MG 3AS 5LT	819	8699459938198	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG 5LT	777	8699459937771	FARMAKON-A 3K 138NA 1,25CA G 5LT
860	8699459938600	FARMAKON A 2K 1,0Mg 3AS 8LT	818	8699459938181	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG 8LT	776	8699459937764	FARMAKON-A 3K 138NA 1,25CA G 8LT
859	8699459938594	FARMAKON A 2K 1,0MG 3AS 10LT	817	8699459938174	FARMAKON A 2K 1,25CA 1,0MG 10LT	775	8699459937757	FARMAKON A 3K 138Na 1,25Ca G 10LT
858	8699459938587	FARMAKON-A 2K 1,0CA G 5LT	816	8699459938167	FARMAKON-A 2K1,25CA 1,0MG G 5LT	774	8699459937740	FARMAKON A 3K 1,0MG G 5LT
857	8699459938570	FARMAKON-A 2K 1,0CA G 8LT	815	8699459938150	FARMAKON A 2K1,25Ca 1,0Mg G 8LT	773	8699459937733	FARMAKON-A 3K 1,0MG G 8LT
856	8699459938563	FARMAKON A 2K 1,0Ca G 10LT	814	8699459938143	FARMAKON-A 2K1,25CA 1,0MG G 10LT	772	8699459937726	FARMAKON A 3K 1,0Mg G 10LT
855	8699459938556	FARMAKON-A 2K 1,0MG 3AS G 5LT	813	8699459938136	FARMAKON-A 3K 5LT	771	8699459937719	FARMAKON A 3K 138Na 5LT
854	8699459938549	FARMAKON A 2K 1,0Mg 3AS G 8LT	812	8699459938129	FARMAKON A 3K 8LT	770	8699459937702	FARMAKON-A 3K 138NA 8LT
853	8699459938532	FARMAKON A 2K 1,0Mg 3AS G 10LT	811	8699459938112	FARMAKON A 3K 10LT	769	8699459937696	FARMAKON A 3K 138NA 10LT
852	8699459938525	FARMAKON-A 2K 1,75CA 1,0MG 5LT	810	8699459938105	FARMAKON A 3K G 5LT	768	8699459937689	FARMAKON-A 3K 138NA G 5LT
851	8699459938518	FARMAKON A 2K 1,75Ca 1,0Mg 8LT	809	8699459938099	FARMAKON-A 3K G 8LT	767	8699459937672	FARMAKON-A 3K 138NA G 8LT
850	8699459938501	FARMAKON-A 2K 1,75CA 1,0MG 10LT	808	8699459938082	FARMAKON-A 3K G 10LT	766	8699459937665	FARMAKON A 3K 138NA G 10LT
849	8699459938495	FARMAKON-A 2K 138NA 3AS G 5LT	807	8699459938075	FARMAKON A 3K 2G 5LT	765	8699459937658	FARMAKON-A 3K 1,75CA 3AS G 5LT
848	8699459938488	FARMAKON-A 2K 138NA 3AS G 8LT	806	8699459938068	FARMAKON A 3K 2G 8LT	764	8699459937641	FARMAKON-A 3K 1,75CA 3AS G 8LT
847	8699459938471	FARMAKON-A 2K 138NA 3AS G 10LT	805	8699459938051	FARMAKON-A 3K 2G 10LT	763	8699459937634	FARMAKON A 3K 1,75CA 3AS G 10LT
846	8699459938464	FARMAKON-A 2K 3AS 2G 5LT	804	8699459938044	FARMAKON-A 3K 1,25CA 5LT	762	8699459937627	FARMAKON-A 3K 1,25CA 3AS G 5LT
845	8699459938457	FARMAKON-A 2K 3AS 2G 8LT	803	8699459938037	FARMAKON A 3K 1,25Ca 8LT	761	8699459937610	FARMAKON A 3K 1,25CA 3AS G 8LT
844	8699459938440	FARMAKON A 2K 3AS 2G 10LT	802	8699459938020	FARMAKON A 3K 1,25Ca 10LT	760	8699459937603	FARMAKON-A 3K 1,25CA 3AS G 10LT
843	8699459938433	FARMAKON A 2K 1,75CA 3AS 5LT	801	8699459938013	FARMAKON A 3K 1,25Ca G 5LT	759	8699459937597	FARMAKON-A 3K 3AS 2G 5LT
842	8699459938426	FARMAKON A 2K 1,75Ca 3AS 8LT	800	8699459938006	FARMAKON A 3K 1,25CA G 8LT	758	8699459937580	FARMAKON-A 3K 3AS 2G 8LT
841	8699459938419	FARMAKON A 2K 1,75CA 3AS 10LT	799	8699459937993	FARMAKON A 3K 1,25Ca G 10LT	757	8699459937573	FARMAKON-A 3K 3AS 2G 10LT
840	8699459938402	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG 3AS G 5LT	798	8699459937986	FARMAKON-A 3K 1,25CA 2G 5LT	756	8699459937566	FARMAKON-A 3K 3AS 5LT
839	8699459938396	FARMAKON A 2K 1,25Ca 1,0Mg 3AS G 8LT	797	8699459937979	FARMAKON A 3K 1,25CA 2G 8LT	755	8699459937559	FARMAKON A 3K 3AS 8LT
838	8699459938389	FARMAKON A 2K 1,25Ca 1,0Mg 3AS G 10LT	796	8699459937962	FARMAKON A 3K 1,25Ca 2G 10LT	754	8699459937542	FARMAKON-A 3K 3AS 10LT
837	8699459938372	FARMAKON-A 2K 142NA 5LT	795	8699459937955	FARMAKON A 3K 1,75CA 5LT	753	8699459937535	FARMAKON-A 3K 3AS G 5LT
836	8699459938365	FARMAKON A 2K 142Na 8LT	794	8699459937948	FARMAKON-A 3K 1,75CA 8LT	752	8699459937528	FARMAKON A 3K 3AS G 8LT
835	8699459938358	FARMAKON-A 2K 142NA 10LT	793	8699459937931	FARMAKON-A 3K 1,75CA 10LT	751	8699459937511	FARMAKON-A 3K 3AS G 10LT
834	8699459938341	FARMAKON A 2K 0,25MG 5LT	792	8699459937924	FARMAKON-A 3K 1,75CA G 5LT	750	8699459937504	FARMAKON A 3K 1,75Ca 1,0Mg G 5LT
833	8699459938334	FARMAKON-A 2K 0,25MG 8LT	791	8699459937917	FARMAKON-A 3K 1,75CA G 8LT	749	8699459937498	FARMAKON-A 3K 1,75CA 1,0MG G 8LT
832	8699459938327	FARMAKON A 2K 0,25Mg 10LT	790	8699459937900	FARMAKON A 3K 1,75CA G 10LT	748	8699459937481	FARMAKON-A 3K 1,75CA 1,0MG G 10LT
831	8699459938310	FARMAKON A 2K 2,0Ca G 5LT	789	8699459937894	FARMAKON-A 3K 1,75CA 2G 5LT	747	8699459937474	FARMAKON A 3K 1,0MG 5LT
830	8699459938303	FARMAKON A 2K 2,0Ca G 8LT	788	8699459937887	FARMAKON A 3K 1,75Ca 2G 8LT	746	8699459937467	FARMAKON A 3K 1,0Mg 8LT
829	8699459938297	FARMAKON-A 2K 2,0CA G 10LT	787	8699459937870	FARMAKON A 3K 1,75CA 2G 10LT	745	8699459937450	FARMAKON A 3K 1,0MG 10LT
828	8699459938280	FARMAKON A 2K1,25Ca 3AS 5LT	786	8699459937863	FARMAKON-A 3K 142NA 1,0MG 3AS 8LT	744	8699459937443	FARMAKON A 3K 1,0Mg 3AS 5LT
827	8699459938273	FARMAKON-A 2K1,25CA 3AS 8LT	785	8699459937856	FARMAKON-A 3K 142NA 1,0MG 3AS 8LT	743	8699459937436	FARMAKON A 3K 1,0MG 3AS 8LT



UDI: 576037912401EY



UDI: 576037912401EY

KONSANTRE HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI Ürün Listesi / Concentrate Hemodialysis Solution Product List

Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı
742	8699459937429	FARMAKON-A 3K 1,0MG 3AS 10LT	699	8699459936996	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg G 5LT	655	8699459936552	FARMAKON A 2K AS5 10LT
741	8699459937412	FARMAKON-A 3K 1,0CA G 5LT	698	8699459936989	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG G 8LT	654	8699459936545	FARMAKON A 2K G AS5 5LT
740	8699459937405	FARMAKON-A 3K 1,0CA G 8LT	697	8699459936972	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg G 10LT	653	8699459936538	FARMAKON-A 2K G AS5 8LT
739	8699459937399	FARMAKON A 3K 1,0Ca G 10LT	695	8699459936958	FARMAKON A 4K 8LT	652	8699459936521	FARMAKON A 2K G AS5 10LT
738	8699459937382	FARMAKON-A 3K 1,0MG 3AS G 5LT	693	8699459936934	FARMAKON-A 4K G 5LT	651	8699459936514	FARMAKON-A 2K 2G AS5 5LT
737	8699459937375	FARMAKON-A 3K 1,0MG 3AS G 8LT	692	8699459936927	FARMAKON A 4K G 8LT	650	8699459936507	FARMAKON A 2K 2G AS5 8LT
736	8699459937368	FARMAKON A 3K 1,0Mg 3AS G 10LT	691	8699459936910	FARMAKON-A 4K G 10LT	648	8699459936484	FARMAKON-A 2K 1,25CA AS5 5LT
735	8699459937351	FARMAKON-A 3K 1,75CA 1,0MG 5LT	690	8699459936903	FARMAKON A 4K 1,25Ca 5LT	647	8699459936477	FARMAKON-A 2K 1,25CA AS5 8LT
734	8699459937344	FARMAKON A 3K 1,75Ca 1,0Mg 8LT	689	8699459936897	FARMAKON-A 4K 1,25CA 8LT	646	8699459936460	FARMAKON-A 2K 1,25CA AS5 10LT
733	8699459937337	FARMAKON A 3K 1,75Ca 1,0Mg 10LT	688	8699459936880	FARMAKON A 4K 1,25Ca 10LT	645	8699459936453	FARMAKON A 2K 1,25CA G AS5 5LT
732	8699459937320	FARMAKON-A 3K 138NA 3AS G 5LT	687	8699459936873	FARMAKON-A 4K 1,25CA G 5LT	644	8699459936446	FARMAKON-A 2K 1,25CA G AS5 8LT
731	8699459937313	FARMAKON-A 3K 138NA 3AS G 8LT	686	8699459936866	FARMAKON-A 4K 1,25CA G 8LT	643	8699459936439	FARMAKON-A 2K 1,25CA G AS5 10LT
730	8699459937306	FARMAKON A 3K 138NA 3AS G 10LT	685	8699459936859	FARMAKON-A 4K 1,25CA G 10LT	642	8699459936422	FARMAKON A 2K 1,75CA AS5 5LT
729	8699459937290	FARMAKON-A 3K 3AS 2G 5LT	684	8699459936842	FARMAKON-A 4K 1,75CA 5LT	641	8699459936415	FARMAKON A 2K 1,75Ca AS5 8LT
728	8699459937283	FARMAKON A 3K 3AS 2G 8LT	683	8699459936835	FARMAKON-A 4K 1,75CA 8LT	640	8699459936408	FARMAKON A 2K 1,75Ca AS5 10LT
727	8699459937276	FARMAKON-A 3K 3AS 2G 10LT	682	8699459936828	FARMAKON-A 4K 1,75CA 10LT	639	8699459936392	FARMAKON A 2K 1,75CA G AS5 5LT
726	8699459937269	FARMAKON-A 3K 1,75CA 3AS 5LT	681	8699459936811	FARMAKON A 4K 1,75Ca G 5LT	638	8699459936385	FARMAKON-A 2K 1,75CA G AS5 8LT
724	8699459937245	FARMAKON-A 3K 1,75CA 3AS 10LT	680	8699459936804	FARMAKON-A 4K 1,75CA G 8LT	637	8699459936378	FARMAKON-A 2K 1,75CA G AS5 10LT
723	8699459937238	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG 3AS G 5LT	679	8699459936798	FARMAKON-A 4K 1,75CA G 10LT	636	8699459936361	FARMAKON A 2K 1,25Ca 0,25Mg AS5 5LT
722	8699459937221	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg 3AS G 8LT	678	8699459936781	FARMAKON-A 1K AS5 5LT	635	8699459936354	FARMAKON A 2K 1,25CA 0,25MG AS5 8LT
721	8699459937214	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG 3AS G 10LT	677	8699459936774	FARMAKON A 1K AS5 8LT	634	8699459936347	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG AS5 10LT
720	8699459937207	FARMAKON-A 3K 142NA 5LT	676	8699459936767	FARMAKON-A 1K AS5 10LT	633	8699459936330	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG G AS5 5LT
719	8699459937191	FARMAKON-A 3K 142NA 8LT	675	8699459936750	FARMAKON A 1K G AS5 5LT	632	8699459936323	FARMAKON A 2K 1,25Ca 0,25Mg G AS5 8LT
718	8699459937184	FARMAKON-A 3K 142NA 10LT	674	8699459936743	FARMAKON-A 1K G AS5 8LT	631	8699459936316	FARMAKON-A 2K 1,25CA 0,25MG G AS5 10LT
717	8699459937177	FARMAKON A 3K 0,25Mg 5LT	673	8699459936736	FARMAKON A 1K G AS5 10LT	630	8699459936309	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG AS5 5LT
716	8699459937160	FARMAKON-A 3K 0,25MG 8LT	672	8699459936729	FARMAKON A 1K 2G AS5 5LT	629	8699459936293	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG AS5 8LT
715	8699459937153	FARMAKON A 3K 0,25MG 10LT	671	8699459936712	FARMAKON A 1K 2G AS5 8LT	628	8699459936286	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG AS5 10LT
714	8699459937146	FARMAKON A 3K 2,0CA G 5LT	670	8699459936705	FARMAKON-A 1K 2G AS5 10LT	627	8699459936279	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG G AS5 5LT
713	8699459937139	FARMAKON A 3K 2,0Ca G 8LT	669	8699459936699	FARMAKON-A 1K 1,25CA AS5 5LT	626	8699459936262	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG G AS5 8LT
712	8699459937122	FARMAKON-A 3K 2,0CA G 10LT	668	8699459936682	FARMAKON A 1K 1,25Ca AS5 8LT	625	8699459936255	FARMAKON-A 2K 1,25CA 1,0MG G AS5 10LT
711	8699459937115	FARMAKON A 3K 1,25Ca 3AS 5LT	667	8699459936675	FARMAKON-A 1K 1,25CA AS5 10LT	624	8699459936248	FARMAKON A 3K AS5 5LT
710	8699459937108	FARMAKON-A 3K 1,25CA 3AS 8LT	666	8699459936668	FARMAKON A 1K 1,25Ca G AS5 5LT	623	8699459936231	FARMAKON A 3K AS5 8LT
709	8699459937092	FARMAKON-A 3K 1,25CA 3AS 10LT	665	8699459936651	FARMAKON-A 1K 1,25CA G AS5 8LT	622	8699459936224	FARMAKON A 3K AS5 10LT
708	8699459937085	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG 5LT	664	8699459936644	FARMAKON-A 1K 1,25CA G AS5 10LT	621	8699459936217	FARMAKON-A 3K G AS5 5LT
707	8699459937078	FARMAKON A 3K 1,25Ca 0,25Mg 8LT	663	8699459936637	FARMAKON A 1K 1,75Ca AS5 5LT	620	8699459936200	FARMAKON A 3K G AS5 8LT
706	8699459937061	FARMAKON A 3K 1,25Ca 0,25Mg 10LT	662	8699459936620	FARMAKON-A 1K 1,75CA AS5 8LT	619	8699459936194	FARMAKON-A 3K G AS5 10LT
705	8699459937054	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG G 5LT	661	8699459936613	FARMAKON A 1K 1,75CA AS5 10LT	618	8699459936187	FARMAKON A 3K 2G AS5 5LT
704	8699459937047	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG G 8LT	660	8699459936606	FARMAKON-A 1K 1,75CA G AS5 5LT	617	8699459936170	FARMAKON A 3K 2G AS5 8LT
703	8699459937030	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG G 10LT	659	8699459936590	FARMAKON A 1K 1,75Ca G AS5 8LT	616	8699459936163	FARMAKON-A 3K 2G AS5 10LT
702	8699459937023	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG 5LT	658	8699459936583	FARMAKON A 1K 1,75CA G AS5 10LT	615	8699459936156	FARMAKON A 3K 1,25Ca AS5 5LT
701	8699459937016	FARMAKON A 3K 1,25CA 1,0MG 8LT	657	8699459936576	FARMAKON-A 2K AS5 5LT	614	8699459936149	FARMAKON-A 3K 1,25CA AS5 8LT
700	8699459937009	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG 10LT	656	8699459936569	FARMAKON A 2K AS5 8LT	613	8699459936132	FARMAKON-A 3K 1,25CA AS5 10LT



UDI: 576037912401EY



UDI: 576037912401EY

KONSANTRE HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI Ürün Listesi / Concentrate Hemodialysis Solution Product List

Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı
612	8699459936125	FARMAKON-A 3K 1,25CA G AS5 5LT	568	8699459935685	FARMAKON A 1,5K G 10LT	526	8699459935265	FARMAKON A 3K 138NA 1.75CA 3AS 8LT
611	8699459936118	FARMAKON-A 3K 1,25CA G AS5 8LT	567	8699459935678	FARMAKON A 1,5K 1,75CA G 5LT	525	8699459935258	FARMAKON A 3K 138NA 1.75CA 3AS G 8L
610	8699459936101	FARMAKON A 3K 1,25Ca G AS5 10LT	566	8699459935661	FARMAKON A 1,5K 1,75CA G 8LT	524	8699459935241	FARMAKON A 2K 138NA 1.25CA AS5 8LT
608	8699459936088	FARMAKON-A 3K 1,75CA AS5 8LT	565	8699459935654	FARMAKON A 1,5K 1,75CA G 10LT	523	8699459935234	FARMAKON A 2K 138NA 1.25CA G AS5 8L
607	8699459936071	FARMAKON-A 3K 1,75CA AS5 10LT	564	8699459935647	FARMAKON A 2K 138NA 3AS 5LT	522	8699459935227	FARMAKON A 2K 138NA AS5 8LT
606	8699459936064	FARMAKON-A 3K 1,75CA G AS5 5LT	563	8699459935630	FARMAKON A 2K 138NA 1.25CA 3AS 5LT	521	8699459935210	FARMAKON A 2K 138NA G AS5 8LT
605	8699459936057	FARMAKON-A 3K 1,75CA G AS5 8LT	562	8699459935623	FARMAKON A 2K 138NA 1.25CA 3AS G 5LT	520	8699459935203	FARMAKON A 2K 138NA 1,75CA AS5 8LT
604	8699459936040	FARMAKON-A 3K 1,75CA G AS5 10LT	561	8699459935616	FARMAKON A 2K 138NA 1.75CA 3AS 5 LT	519	8699459935197	FARMAKON A 2K 138NA 1,75CA G AS5 8LT
603	8699459936033	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG AS5 5LT	560	8699459935609	FARMAKON A 2K 138NA 1.75CA 3AS G 5LT	518	8699459935180	FARMAKON A 4K 3AS 8LT
602	8699459936026	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG AS5 8LT	559	8699459935593	FARMAKON A 3K 138NA 3AS 5LT	517	8699459935173	FARMAKON A 4K 3AS G 8LT
601	8699459936019	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG AS5 10LT	558	8699459935586	FARMAKON A 3K 138NA 1.25CA 3AS 5LT	516	8699459935166	FARMAKON A 4K 1,25CA 3AS 8LT
600	8699459936002	FARMAKON A 3K 1,25Ca 0,25Mg G AS5 5LT	557	8699459935579	FARMAKON A 3K 138NA 1.25CA 3AS G 5LT	515	8699459935159	FARMAKON A 4K 1,25CA 3AS G 8LT
599	8699459935999	FARMAKON A 3K 1,25Ca 0,25Mg G AS5 8LT	556	8699459935562	FARMAKON A 138NA 1.75CA 3AS 5LT	514	8699459935142	FARMAKON A 4K 1,75CA 3AS 8LT
598	8699459935982	FARMAKON-A 3K 1,25CA 0,25MG G AS5 10LT	555	8699459935555	FARMAKON A 138NA 1.75CA 3AS G 5LT	513	8699459935135	FARMAKON A 4K 1,75CA 3AS G 8LT
597	8699459935975	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG AS5 5LT	554	8699459935548	FARMAKON A 138NA 1.25CA AS5 5LT	512	8699459935128	FARMAKON A 1K 138NA 1,25CA 3AS 8LT
596	8699459935968	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg AS5 8LT	553	8699459935531	FARMAKON A 2K 138NA 1.25CA G AS5 5LT	511	8699459935111	FARMAKON A 1K 138NA 1,25CA 3AS G 8LT
595	8699459935951	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg AS5 10LT	552	8699459935524	FARMAKON A 2K 138NA AS5 5LT	510	8699459935104	FARMAKON A 1K 138NA 3AS 8LT
594	8699459935944	FARMAKON-A 3K 1,25CA 1,0MG G AS5 5LT	551	8699459935517	FARMAKON A 138NA G AS5 5LT	509	8699459935098	FARMAKON A 1K 138NA 3AS G 8LT
593	8699459935937	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg G AS5 8LT	550	8699459935500	FARMAKON A 2K 138NA 1.75CA AS5 5LT	508	8699459935081	FARMAKON A 1K 138NA 1,75CA 3AS 8LT
592	8699459935920	FARMAKON A 3K 1,25Ca 1,0Mg G AS5 10LT	549	8699459935494	FARMAKON A 138NA 1.75CA G AS5 5LT	507	8699459935074	FARMAKON A 1K 138NA 3AS G 8LT
591	8699459935913	FARMAKON A 4K AS5 5LT	548	8699459935487	FARMAKON A 4K 3AS 5LT	506	8699459935067	FARMAKON A 1K 1,75CA 3AS 8LT
589	8699459935890	FARMAKON A 4K AS5 10LT	547	8699459935470	FARMAKON A 4K 3AS G 5LT	505	8699459935050	FARMAKON A 1K 1,25CA 3AS 8LT
588	8699459935883	FARMAKON-A 4K G AS5 5LT	546	8699459935463	FARMAKON A 4K 1.25CA 3AS 5LT	504	8699459935043	FARMAKON A 2K 138NA 10LT
587	8699459935876	FARMAKON-A 4K G AS5 8LT	545	8699459935456	FARMAKON A 4K 1.25CA 3AS G 5LT	503	8699459935036	FARMAKON A 2K 138NA 1,25CA 3AS 10LT
586	8699459935869	FARMAKON A 4K G AS5 10LT	544	8699459935449	FARMAKON A 4K 1.75CA 3AS 5LT	502	8699459935029	FARMAKON A 2K 138NA 1,25CA 3AS G 10LT
585	8699459935852	FARMAKON A 2K 1,25CA 5 LT	543	8699459935432	FARMAKON A 4K 1.75CA 3AS G 5LT	501	8699459935012	FARMAKON A 2K 138NA 1,75CA 3AS 10LT
584	8699459935845	FARMAKON A 2K 1,25CA 8LT	542	8699459935425	FARMAKON A 1K 138NA 1.25CA 3AS 5LT	500	8699459935005	FARMAKON A 2K 138NA 1,75CA 3AS G 10LT
583	8699459935838	FARMAKON A 2K 1,25CA 10LT	541	8699459935418	FARMAKON A 1K 138NA 1.25 3AS G 5LT	499	8699459934992	FARMAKON A 3K 138NA 3AS 10LT
582	8699459935821	FARMAKON A 2K 2G 5LT	540	8699459935401	FARMAKON A 1K 138NA 3AS 5LT	498	8699459934985	FARMAKON A 3K 138NA 1,25CA 3AS 10LT
581	8699459935814	FARMAKON A 2K 2G 8LT	539	8699459935395	FARMAKON A 1K 138NA 3AS G 5LT	497	8699459934978	FARMAKON A 3K 138NA 1,25CA 3AS G 10LT
580	8699459935807	FARMAKON A 2K 2G 10LT	538	8699459935388	FARMAKON A 138NA 1.75CA 3AS G 5LT	496	8699459934961	FARMAKON A 3K 138NA 1,75CA 3AS 10LT
579	8699459935791	FARMAKON A 1K 3AS G 5LT	537	8699459935371	FARMAKON A 1K 138NA 1.75CA 3AS G 5LT	495	8699459934954	FARMAKON A 3K 138NA 1,75CA 3AS G 10LT
578	8699459935784	FARMAKON A 1K 3AS G 8LT	536	8699459935364	FARMAKON A 1K 1.75CA 3AS 5T	494	8699459934947	FARMAKON A 2K 138NA 1,25CA AS5 10LT
577	8699459935777	FARMAKON A 1K 3AS G 10LT	535	8699459935357	FARMAKON A 1K 1,25CA 3AS 5LT	493	8699459934930	FARMAKON A 2K 138NA 1,25CA G AS5 10LT
576	8699459935760	FARMAKON A 1K 1,75CA 3AS G 5LT	534	8699459935340	FARMAKON A 2K 138NA 3AS 8LT	492	8699459934923	FARMAKON A 2K 138NA AS5 10LT
575	8699459935753	FARMAKON A 1K 1,75CA 3AS G 8LT	533	8699459935333	2K 138NA 1.25CA 3AS 8LT	491	8699459934916	FARMAKON A 2K 138NA G AS5 10LT
574	8699459935746	FARMAKON A 1K 1,75CA 3AS G 10LT	532	8699459935326	FARMAKON A 2K 138NA 1.25CA 3AS G 8L	490	8699459934909	FARMAKON A 2K 138NA 1,75CA AS5 10LT
573	8699459935739	FARMAKON A 1,5K 1,25CA G 5LT	531	8699459935319	FARMAKON A 2K 138NA 1.75CA 3AS 8LT	489	8699459934893	FARMAKON A 2K 138NA 1,75CA G AS5 10LT
572	8699459935722	FARMAKON A 1,5K 1,25CA G 8LT	530	8699459935302	FARMAKON A 2K 138NA 1.75CA 3AS G 8LT	488	8699459934886	FARMAKON A 4K 3AS 10LT
571	8699459935715	FARMAKON A 1,5K 1,25CA G 10LT	529	8699459935296	FARMAKON A 3K 138NA 3AS 8LT	487	8699459934879	FARMAKON A 4K 3AS G 10LT
570	8699459935708	FARMAKON A 1,5K G 5LT	528	8699459935289	FARMAKON A 3K 138NA 1.25CA 3AS 8LT	486	8699459934862	FARMAKON A 4K 1,25CA 3AS 10LT
569	8699459935692	FARMAKON A 1,5K G 8LT	527	8699459935272	FARMAKON A 3K 138 Na 1.25CA 3AS G	485	8699459934855	FARMAKON A 4K 1,25CA 3AS G 10LT



UDI: 576037912401EY



UDI: 576037912401EY



KONSANTRE HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI Ürün Listesi / Concentrate Hemodialysis Solution Product List

Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı	Referans / Katalog No	Ürün Barkod No	Etiket Adı
484	8699459934848	FARMAKON A 4K 1,75CA 3AS 10LT	468	8699459934688	FARMAKON A Y-1K 3AS 10LT	452	8699459934527	FARMAKON A Y-1K 138NA 1,25CA 3AS 10LT
483	8699459934831	FARMAKON A 4K 1,75CA 3AS G 10LT	467	8699459934671	FARMAKON A Y-1K 1,75CA 3AS G 10LT	451	8699459934510	FARMAKON A Y-1K 138NA 3AS G 10LT
482	8699459934824	FARMAKON A 1K 138NA 1,25CA 3AS 10LT	466	8699459934664	FARMAKON A Y-1K 1,75CA 3AS 10LT	450	8699459934503	FARMAKON A Y-1K 138NA 3AS 10LT
481	8699459934817	FARMAKON A 1K 138NA 1,25CA 3AS G 10LT	465	8699459934657	FARMAKON A Y-2K 1,25CA 3AS G 10LT	449	8699459934497	FARMAKON A Y-1K 138NA 1,75CA 3AS G 10LT
480	8699459934800	FARMAKON A 1K 138NA 3AS 10LT	464	8699459934640	FARMAKON A Y-2K 1,25CA 3AS 10LT	448	8699459934480	FARMAKON A Y-1K 138NA 1,75CA 3AS 10LT
479	8699459934794	FARMAKON A 1K 138NA 3AS G 10LT	463	8699459934633	FARMAKON A Y-2K 3AS G 10LT	447	8699459934473	FARMAKON A Y-2K 138NA 1,25CA 3AS G 10LT
478	8699459934787	FARMAKON A 1K 138NA 1,75CA 3AS 10LT	462	8699459934626	FARMAKON A Y-2K 3AS 10LT	445	8699459934459	FARMAKON A Y-2K 138NA 3AS G 10LT
477	8699459934770	FARMAKON A 1K 138NA 1,75CA 3AS G 10LT	461	8699459934619	FARMAKON A Y-2K 1,75CA 3AS G 10LT	444	8699459934442	FARMAKON A Y-2K 138NA 3AS 10LT
476	8699459934763	FARMAKON A 1K 1,75CA 3AS 10LT	460	8699459934602	FARMAKON A Y-2K 1,75CA 3AS 10LT	443	8699459934435	FARMAKON A Y-2K 138NA 1,75CA 3AS G 10LT
475	8699459934756	FARMAKON A 1K 1,25CA 3AS 10LT	459	8699459934596	FARMAKON A Y-3K 1,25CA 3AS G 10LT	442	8699459934428	FARMAKON A Y-2K 138NA 1,75CA 3AS 10LT
474	8699459934749	FARMAKON A 1K 3AS 5LT	458	8699459934589	FARMAKON A Y-3K 1,25CA 3AS 10LT	441	8699459934411	FARMAKON A Y-3K 138NA 1,25CA 3AS G 10LT
473	8699459934732	FARMAKON A 1K 3AS 8LT	457	8699459934572	FARMAKON A Y-3K 3AS G 10LT	440	8699459934404	FARMAKON A Y-3K 138NA 1,25CA 3AS 10LT
472	8699459934725	FARMAKON A 1K 3AS 10LT	456	8699459934565	FARMAKON A Y-3K 3AS 10LT	439	8699459934398	FARMAKON A Y-3K 138NA 3AS G 10LT
471	8699459934718	FARMAKON A Y-1K 1,25CA 3AS G 10LT	455	8699459934558	FARMAKON A Y-3K 1,75CA 3AS G 10LT	438	8699459934381	FARMAKON A Y-3K 138NA 3AS 10LT
470	8699459934701	FARMAKON A Y-1K 1,25CA 3AS 10LT	454	8699459934541	FARMAKON A Y-3K 1,75CA 3AS 10LT	437	8699459934374	FARMAKON A Y-3K 138NA 1,75CA 3AS G 10LT
469	8699459934695	FARMAKON A Y-1K 3AS G 10LT	453	8699459934534	FARMAKON A Y-1K 138NA 1,25CA 3AS G 10LT	436	8699459934367	FARMAKON A Y-3K 138NA 1,75CA 3AS 10LT